

» **NEU**  
QUATTROCONE  
D 3,8 mm «

QUATTROCONE






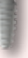

**IPS**  
Implant Systems

**QUATTROCONE**  
**D 3,8 MM**

 **MEDENTIKA**<sup>®</sup>  
A Straumann Group Brand

# » Quattrocone D 3,8 mm «

Verfügbar ab April 2019  
(für CE-Länder)

LÄNGE DURCHMESSER		7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
RI*						
	D 3,8 mm	3-01-16	3-01-17	3-01-18	3-01-19	3-01-20

\*Implantatanschluss RI  
(Regular interface)

Die auf der Implantatverpackung sichtbare Angabe des Implantatdurchmessers, umrahmt von der Farbkodierung, vereinfacht die optische Unterscheidung der jeweiligen Implantatdurchmesser. Die Bohrer für die Implantatbettauflbereitung sind ebenfalls mit diesen Farben gekennzeichnet.



D 3,8 mm

## BOHRER

D 3,8 mm

4-14-01    4-14-71    4-14-72




### Quattrocone Bohrer D 3,8 mm

Pilotbohrer D 2,0 mm  
Standardbohrer D 2,0/3,5 mm  
Kortikalisbohrer D 2,3/3,5/3,6 mm

## BOHRSTOPPS

Der Quattrocone Bohrstopp sorgt für eine präzise Kontrolle der Bohrtiefe während der Implantatbettpräparation für das Setzen von Quattrocone Implantaten. Der Vorteil des Bohrstopps liegt in seiner Anwendbarkeit sowohl bei einfachen als auch anspruchsvolleren Fällen, bei denen die Lage des Mandibularnervs oder des Sinusbodens eine Rolle spielt. Die Bohrstopps werden unsteril geliefert und sind vor ihrer Verwendung zu sterilisieren. Die Bohrstopps können nur mit den neuen, schwarz beschichteten Quattrocone Bohrern verwendet werden.

**Die Bohrstopps sind für alle Implantatdurchmesser und Längen erhältlich.**

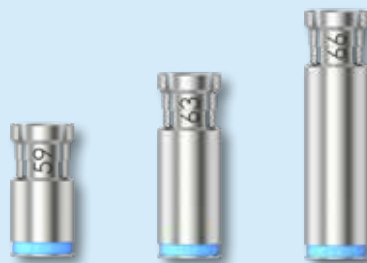

### Wichtig:

Quattrocone Bohrstopps sind nicht indiziert für:

- 1) Extraktionsalveolen, bei denen die Knochenkavität häufig breiter ist als der erforderliche Auflagendurchmesser für den Bohrstopp.
- 2) Die Verwendung als Führungshülsen in Bohrschablonen, da die Führung des Bohrers nicht möglich ist.

# »» Bohrer und Bohrstopps ««

Kombinationstabelle Bohrer und Bohrstopps

KURZE BOHRER				
		Pilot	Standard/ Kortikal	
		2,0	3,5/3,6	
			<b>Implantat 3,8</b>	
Länge Implantat	7,0	Bohrstopp Nr.	10	63
	9,0		8	61
	11,0		6	59
	13		4	58
	15		2	57



LANGE BOHRER				
		Pilot	Standard/ Kortikal	
		2,0	3,5/3,6	
			<b>Implantat 3,8</b>	
Länge Implantat	7,0	Bohrstopp Nr.	14	66
	9,0		13	65
	11,0		11	64
	13		9	62
	15		7	60





» MEDENTiKA®  
**Quattrocone D 3,8 mm** «

Produktübersicht

## Quattrocone Implantat

**D 3,8 mm**


- D 3,8
- Titan Grade 4
- steril verpackt
- inkl. Verschlusschraube



Länge	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
Implantatanschluss	RI	RI	RI	RI	RI
Artikel-Nr.	3-01-16	3-01-17	3-01-18	3-01-19	3-01-20

## Bohrer für Quattrocone Implantat D 3,8

- Edelstahl
- ADLC beschichtet

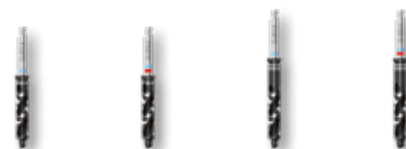

Typ	Standard-bohrer	Kortikalis-bohrer	Standard-bohrer	Kortikalis-bohrer
Durchmesser (mm)	2,0/3,5	2,3/3,5/3,6	2,0/3,5	2,3/3,5/3,6
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Länge	L 20 mm	L 20 mm	L 25 mm	L 25 mm
Artikel-Nr.	4-14-71	4-14-72	4-14-73	4-14-74

## MedentiGuide Innenhülse Quattrocone Implantat

•Titan Grade 5 KV



Durchmesser (mm)	D 5,0 / d 3,53
Farbcode	hellblau
Bohrer- durchmes- ser (mm)	D 3,5
Artikel-Nr.	0-32-21

## Bohrstopp Standard-/ Kortikalisbohrer

•Edelstahl



Durchmesser	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm
Bohrstopp Nr.	57	58	59	60	61	62
Farbcode	hellblau	hellblau	hellblau	hellblau	hellblau	hellblau
Artikel-Nr.	4-14-75	4-14-76	4-14-77	4-14-78	4-14-79	4-14-80

## Bohrstopp Standard-/ Kortikalisbohrer

•Edelstahl



Durchmesser	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm	3,5/3,6 mm
Bohrstopp Nr.	63	64	65	66
Farbcode	hellblau	hellblau	hellblau	hellblau
Artikel-Nr.	4-14-81	4-14-82	4-14-83	4-14-84



Herausgeber: MEDENTiKA® GmbH  
Hammweg 8-10  
76549 Hügelshheim  
Tel: +49 (0)7229 69912-10  
info@medentika.de  
www.medentika.com

Gestaltung: Der WeberFink GbR  
Büro für grafische Gestaltung  
www.weberfink.de

Stand: Februar 2019

Wir sind zertifiziert nach:  
**DIN EN ISO 13485**  
**Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG,**  
**Anhang II**

**CE0483**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Gebrauchsanweisungen und Garantiebedingungen finden Sie auf der Internetseite [www.medentika.com](http://www.medentika.com).

Mehr Informationen zur Garantie können auch direkt beim Hersteller angefordert werden.

MEDENTIKA® GmbH  
Hammweg 8-10  
76549 Hügelsheim  
info@medentika.de  
www.medentika.com

» **Präzision** «  
aus Verantwortung «